




階段昇降タンカアタッチメントの取付手順



1. 付属の六角レンチを使い、取り付け固定部の上の部分を外します。

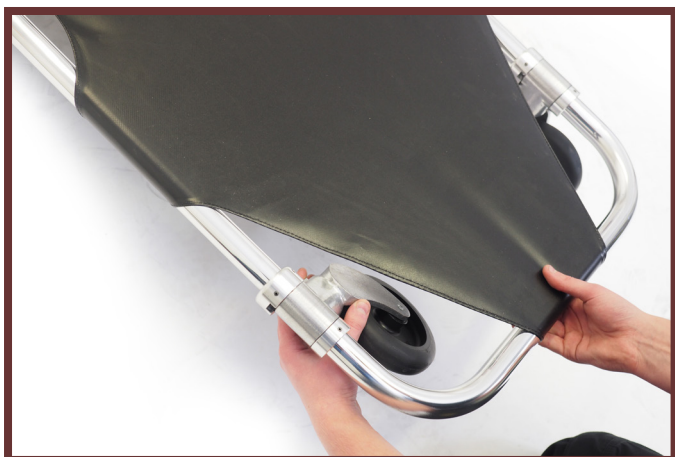

2. ストレッチャーの車輪を本体下にカチッと音がするまで折りたたみます。

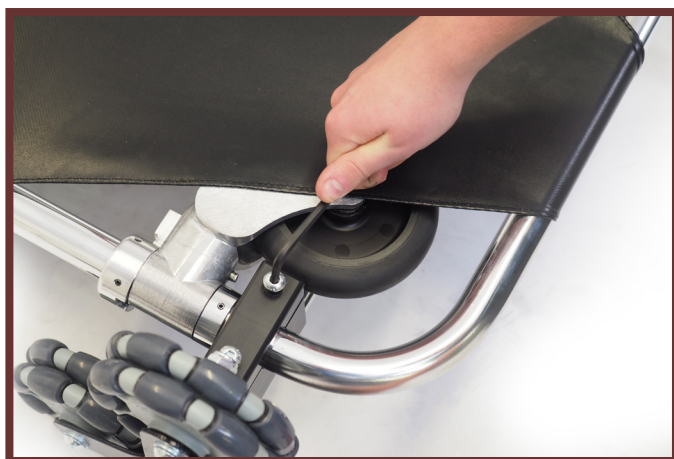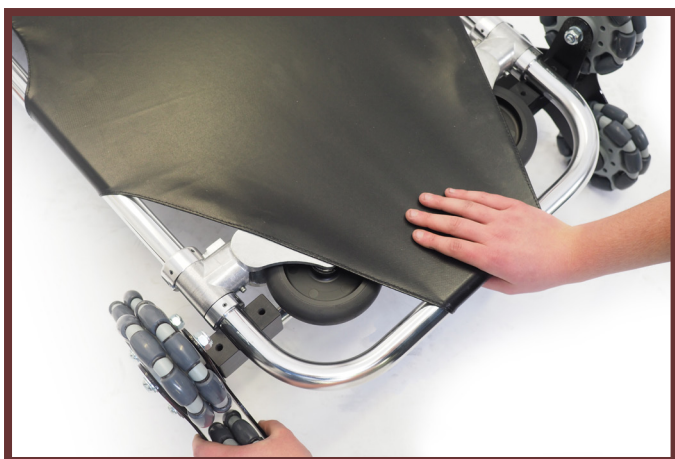

3. 階段昇降用アタッチメントの固定部をタンカのホイールの付け根部分に合わせて、タンカのフレームの下に置きます。取り付け固定部の上の部分を元の位置に戻し、4本のボルトを締めます。

4. 階段昇降用アタッチメントの幅を調節するには、2本の中心にあるナットを緩め、アタッチメントがお使いの折り畳み式タンカの幅になるよう、両側を均等に離します。

アタッチメントの幅が適正になったところでナットを締めてタンカに固定します。

